

Tutorials

The Cleft Care app is designed to automatically identify hypernasality and speech acceptability in children with cleft lip and palate, and to refer those who need intervention to AIISH cleft care services for therapy or surgery. This app allows a Community Health Worker to record a speech sample during a patient visit. The speech sample will be analyzed by our automated system, and the results will be sent via email to the All India Institute of Speech and Hearing (AIISH), where speech pathologists will review the results and the samples uploaded to a secure server by the app and make recommendations for the child. If follow-up by the cleft palate team is recommended, the AIISH team will contact the CHW and the parent.

ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ (Tutorials)

ಸೀಳು ತುಟಿ ಮತ್ತು ಸೀಳು ಅಂಗುಳಿನ (cleft lip and palate) ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಅನುನಾಸಿಕತೆ (hypernasality) ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಐಶ್ (AIISH) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೀಳು ಅಂಗುಳಿನ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಈ 'ಕ್ಲೆಫ್ ಕೇರ್' (Cleft Care) ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು (CHW) ರೋಗಿಯ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು (speech sample) ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (AIISH) ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಾಕ್ ತಜ್ಞರು (Speech Pathologists) ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸರ್ವರ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೀಳು ಅಂಗುಳಿನ ತಂದೆದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಾಸಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, AIISH ತಂಡವು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು (CHW) ಮತ್ತು ಪೋಷಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.

Instructions on how to use the application:

Login Screen: The CHW logs into the app using a secure login screen that verifies each login against a database of authorized CHW email addresses maintained by the AIISH speech team; any unauthorized email triggers an error message to prevent misuse. The app supports both English and Kannada, and users select their preferred language from a dropdown list so that all stimuli and interface text appear in the chosen language.


ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನದ ಸೂಚನೆಗಳು:

ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಟ್ರೀನ್: AIISH ಸ್ಟೀಚ್ ತಂಡವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ CHW ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲಾಗಿನ್ ಪರದೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು CHW ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ; ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಇಮೇಲ್ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದೋಷ ಸಂದೇಶವನ್ನು (error message) ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಡ್ರಾಪ್‌ಡೌನ್ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು ಆಯ್ದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

Login	Login	Login
Enter your email address	test@asu.edu	wrong@email.com
Select you language	Select you language Kannada English	* The Email ID you entered is not registered Kannada
Login	Login	Login
Need Help?	Need Help?	Need Help?

After login, three tabs appear at the bottom of the screen—Home, Tutorials, and the CHW Profile page—while the top-right corner includes three icons: a search tool to find any patient record by name or record ID, an “Add new record” button to register a new patient, and a help icon to send an email to the support center.

ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ, ಪರದೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ—ಹೋಮ್ (Home), ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ (Tutorials) ಮತ್ತು CHW ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪುಟ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲಿನ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಐಕಾನ್‌ಗಳಿವೆ: ಹೆಸರು ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಐಡಿ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು 'ಸರ್ಚ್' (Search) ಟಾಲ್, ಹೊಸ ರೋಗಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು "ಹೊಸ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿಸಿ" (Add new record) ಬಟನ್, ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲು 'ಸಹಾಯ' (Help) ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತವೆ.

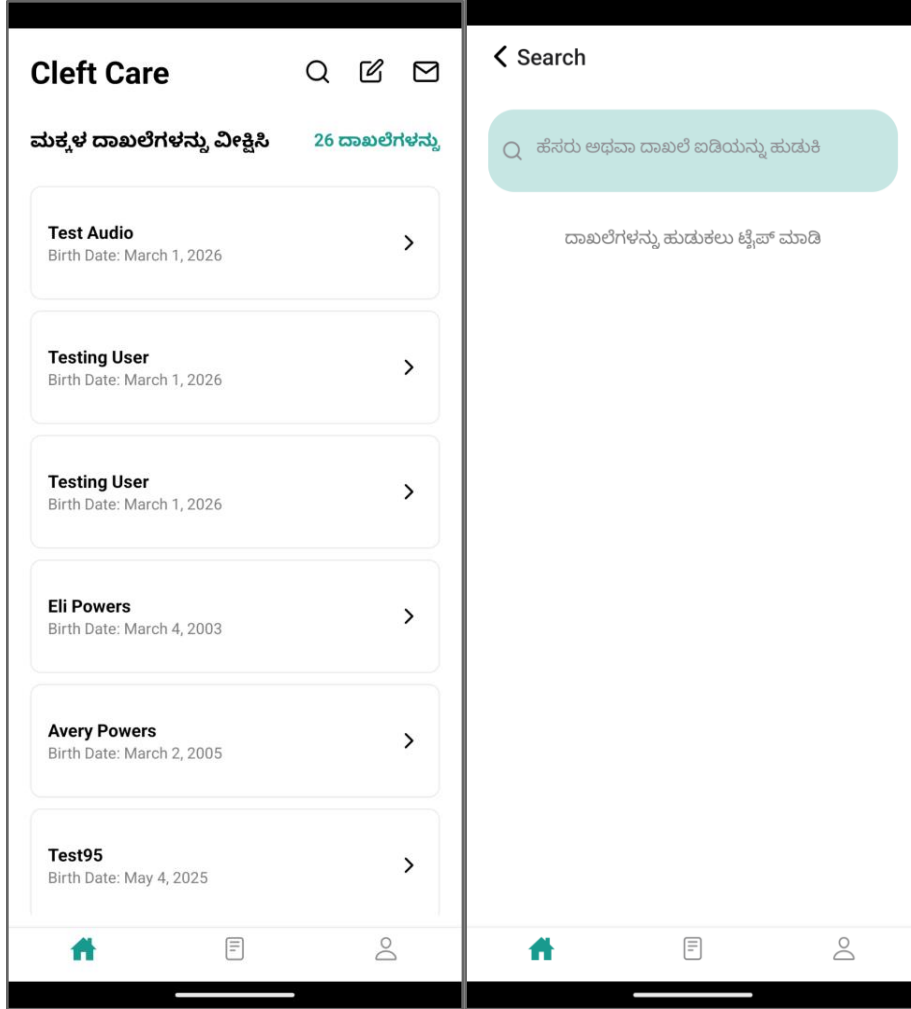

Add Children Record

ಆಡಿಯೋ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಗುವಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಲಿಂಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಶ್ರವಣ ಸ್ಥಿತಿ

ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಿರಿ/ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ (ಐಚ್ಛಿಕ)

ಮುಂದೆ

Help Center

ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ

clefthcareasu@gmail.com


ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಸಲ್ಲಿಸಿ

Adding a New Patient: To add a new patient, the CHW taps the “Add new record” button/icon and enters demographic details such as name, date of birth, gender, hearing status (presence or absence of hearing loss), residential address, and contact number, and can also upload a photo of the patient’s cleft palate as a medical record. After completing these fields, the CHW taps “Next” to review and complete the consent form, where they type the caregiver’s name and provide a signature to accept the terms. Once the consent form is signed, the CHW proceeds to the recording and begins recording the patient’s speech samples.


ಹೊಸ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು: ಹೊಸ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು, CHW “ಹೊಸ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿಸಿ” (**Add new record**) ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ರೋಗಿಯ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಲಿಂಗ, ಶ್ರವಣ ಸ್ಥಿತಿ (ಕಿವುಡುತನ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ), ವಸತಿ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ರೋಗಿಯ ಸೀಳು ಅಂಗುಳಿನ (cleft palate) ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಹ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, CHW “ಮುಂದೆ” (**Next**) ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಸಮ್ಮತಿ

ಪತ್ರವನ್ನು (**consent form**) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆದಾರರ (caregiver) ಹೆಸರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಸಹಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸಮ್ಮತಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, CHW ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ರೋಗಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು (speech samples) ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
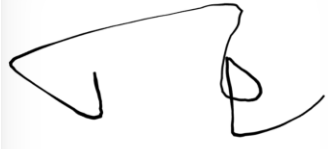
< Add Children Record	< Consent Form	< Add Signature
ಆಡಿಯೋ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಗುವಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ 👤 ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ 📅 ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ 👤 ಲಿಂಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ 😊 ಶ್ರವಣ ಸ್ಥಿತಿ 📍 ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ 📞 ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ 📷 ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಿರಿ/ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ (ಐಚ್ಛಿಕ) ಮುಂದೆ	ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲು ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಾನು, [ಪೋಷಕರು/ಪೋಷಕರ ಹೆಸರು], ನನ್ನ ಮಗು [ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು] ಕ್ಲಿಷ್ಟಕೋರ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತುಗಳು, ನೇಮಕಾತಿ ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪ್ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಗೌಪ್ಯತಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ [ಸಹಾಯ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ] ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕೋರ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ	ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರನ್ನು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ. 👤 Test User  ಅಳಿಸು ನಿಮ್ಮ ಸಹಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

Recording a Patient: On the recording screen, a central green microphone button is used to start and stop each recording, while text displayed above the button presents the speech stimulus prompts which the CHW will be reading it to the child and then the child must repeat it. When the recording is started, the microphone button turns green and shows a text below it that the recording has started. When recording for a given stimulus is complete, the CHW taps the “Next” button in the top-right corner to save that audio to a secure server accessible to AIISH SLPs for later analysis, and this process is repeated for each stimulus in the list. “Next” will be enabled to go to the next phrase only when the current phrase is recorded once. After all stimuli have been recorded, the app displays a confirmation message stating “All audio is saved” to reassure the CHW that every sample has been securely uploaded.


ರೋಗಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು: ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪರದೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಟನ್‌ನ ಮೇಲೆ ದೃನಿ ಪ್ರಚೋದಕ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ಗಳು (speech stimulus prompts) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ; ಇವುಗಳನ್ನು CHW ಮೊದಲು ಓದಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಗುವು ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕು. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಬಟನ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಪಠ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, CHW ಆ ಆಡಿಯೋವನ್ನು AIISH ನ ತಜ್ಞರಿಗೆ (SLPs) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸರ್ವರ್‌ಗೆ ಉಳಿಸಲು ಮೇಲಿನ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ "ಮುಂದೆ" (Next) ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ಗೂ ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು "ಮುಂದೆ" (Next) ಬಟನ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (enabled). ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು CHW ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು "ಎಲ್ಲಾ ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ" (All audio is saved) ಎಂಬ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಪ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

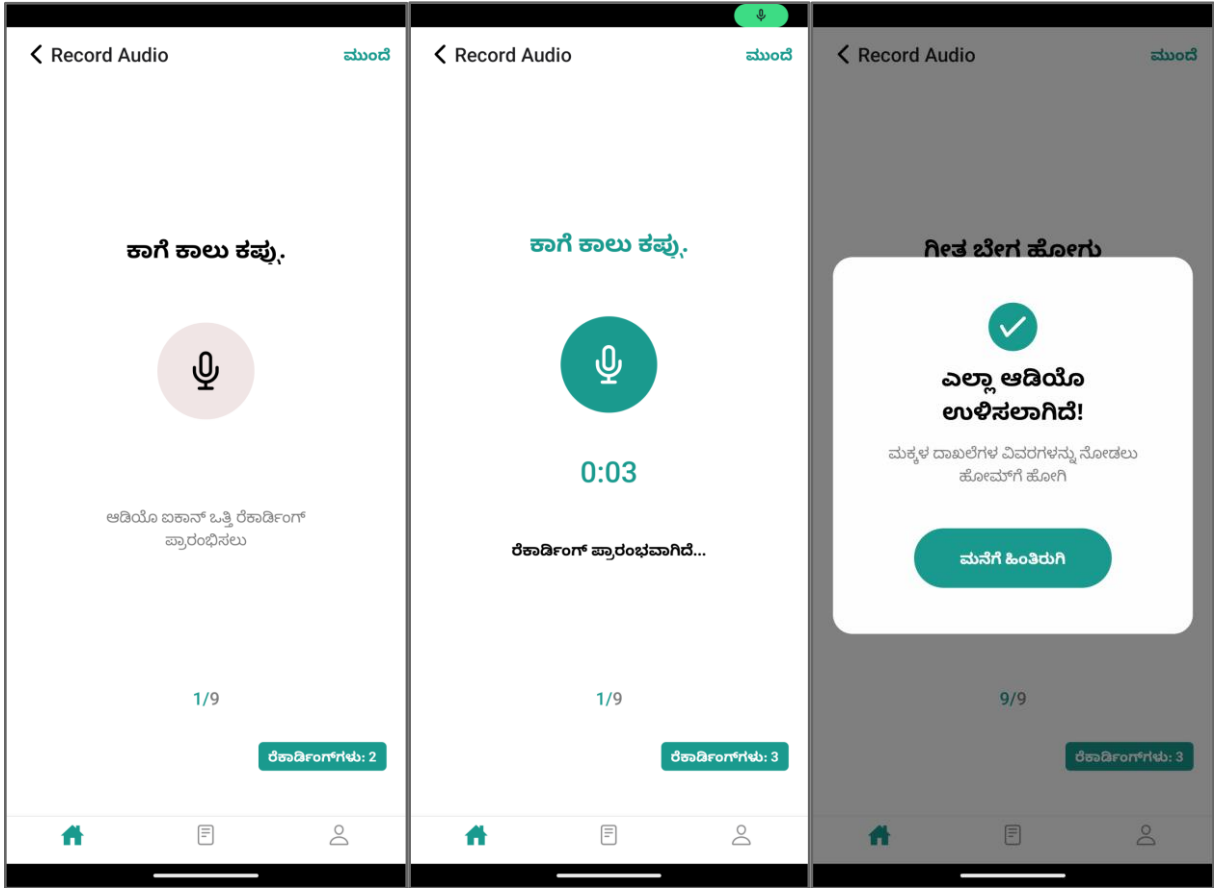

Edit Patient Details: The Home page lists all registered patients and allows CHWs to edit any patient's record. To edit a record, the CHW taps the desired patient entry to


open their details and can update any demographic fields as well as their audio recordings, and then taps "Update" once all changes are complete. By selecting "Edit recordings," the CHW may re-record the phrases from start to end in one go and cannot skip to any other phrase before recording the current one at least once. The newly recorded audio samples will be automatically stored on the main server simultaneously.

ರೋಗಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು (Edit Patient Details): ಹೋಮ್ (Home) ಪುಟವು ನೋಂದಾಯಿತ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ CHW ರೋಗಿಯ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು, CHW ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗಿಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರಗಳನ್ನು (demographic fields) ಮತ್ತು ಅವರ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ "ಅಪ್‌ಡೇಟ್" (Update) ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕು. "ಎಡಿಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್" (Edit recordings) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, CHW ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಮ್ಮೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲು (ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು) ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಡಿಯೋ ಮಾದರಿಗಳು ತಂತಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

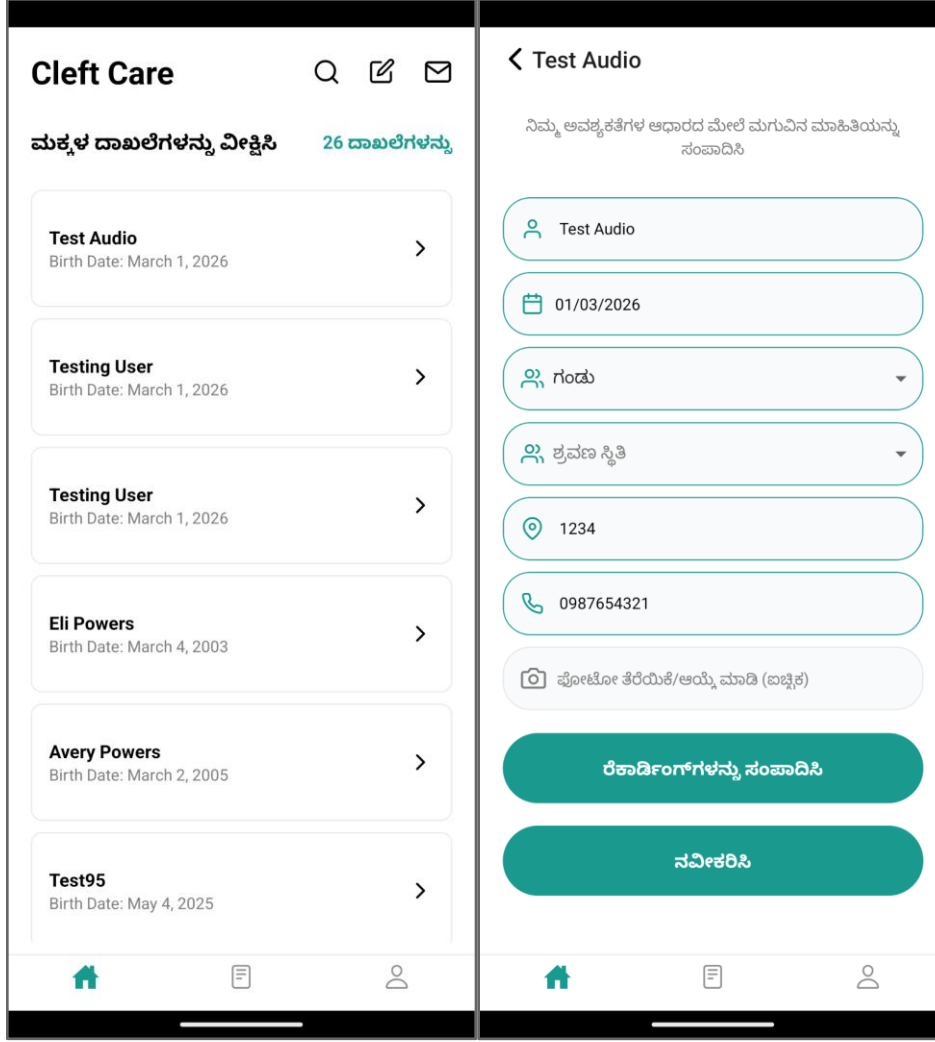

Help and Email Support: A Help button on the Home page (top-right) opens a simple support form where the CHW types their question or concern into an email-style message box and then taps “Submit” to send it to the clinician help center. The clinical team reviews these messages and responds to the CHW via email, addressing any technical or clinical queries related to the app or the recording process.

ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಬೆಂಬಲ (Help and Email Support): ಹೋಮ್ (Home) ಪುಟದ ಮೇಲಿನ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಸಹಾಯ' (Help) ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಬೆಂಬಲ ಫಾರ್ಮ್ (support form) ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ CHW ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮಾದರಿಯ ಸಂದೇಶ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ (message box) ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಕ್ಲಿನಿಷಿಯನ್ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು "ಸಲ್ಲಿಸು" (Submit) ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ತಂಡವು ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ CHW ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

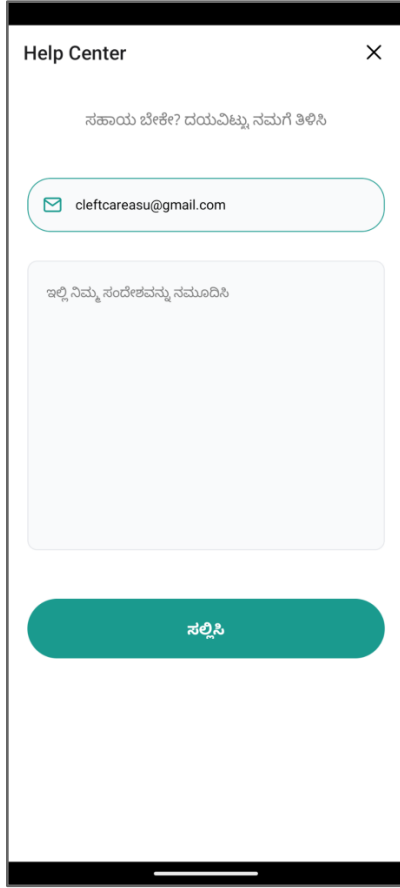

CHW Profile Page: The CHW Profile page displays the CHW's name, registered email address, and clinic location so they can quickly verify their account information. At the bottom of this page, a "Need Help?" text button takes the user directly to the Help page, where they can send an email to the clinician regarding any question or concern about using the app.

CHW ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪುಟ (CHW Profile Page): CHW ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪುಟವು CHW ಅವರ ಹೆಸರು, ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ; ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ "ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ?" (Need Help?) ಎಂಬ ಪಠ್ಯದ ಬಟನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಹಾಯದ ಪುಟಕ್ಕೆ (Help page) ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

